

da Vinci X
SURGICAL SYSTEM
da Vinci Xi
SURGICAL SYSTEM


IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSCÓPIO


Adendo às instruções de reprocessamento


Informações de limpeza, desinfecção
e esterilização para o Endoscópio
Plus Xi Reutilizável utilizado com os
sistemas da Vinci X e Xi

As instruções e parâmetros de reprocessamento informados representam as recomendações do fabricante de acordo com o ISO 17664.

Estas instruções de reprocessamento destinam-se a ser utilizadas em conjunto com as instruções de reprocessamento (PN 554769), as quais são fornecidas em um documento separado.

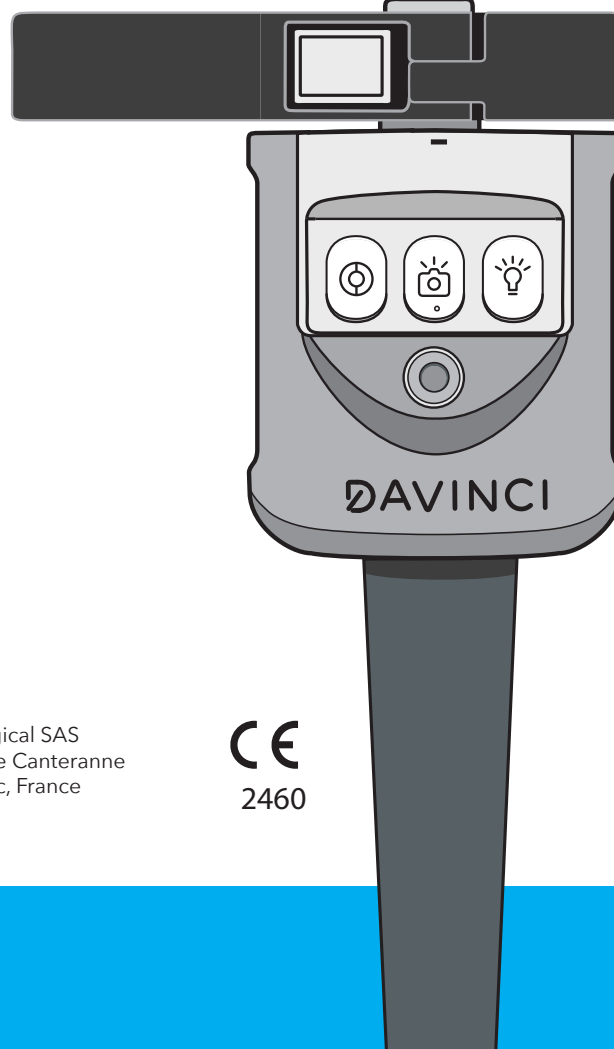

 Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086 USA
intuitive.com

 Intuitive Surgical SAS
11 avenue de Canteranne
33600 Pessac, France


2460

Copyright

© 2022 Intuitive Surgical Operations, Inc. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Intuitive, *Intuitive Surgical* e *da Vinci* são marcas registradas da Intuitive Surgical.

Os nomes/logotipos de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da Intuitive Surgical ou de seus respectivos proprietários.

Consulte www.intuitive.com/trademarks.

Introdução

Este adendo às *Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi* fornece a informação atualizada de que o número de engrenagens na parte inferior da base do endoscópio pode variar de acordo com a versão do endoscópio.


Para instruções completas de reprocessamento de endoscópios, consulte as *Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi*. Mantenha este adendo junto com suas *Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi*.

Este adendo fornece informações atualizadas para os documentos de reprocessamento e seções listados abaixo.

INSTRUÇÕES DE REPROCESSAMENTO	SEÇÃO
<i>Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi</i> (554769)	Visão geral e identificação do Endoscópio Plus Xi

Visão geral do Endoscópio Plus Xi


O endoscópio consiste em ponta, eixo, base, invólucro e cabo, conforme mostrado na figura abaixo. O número de engrenagens na parte inferior da base pode variar de acordo com a versão do endoscópio.

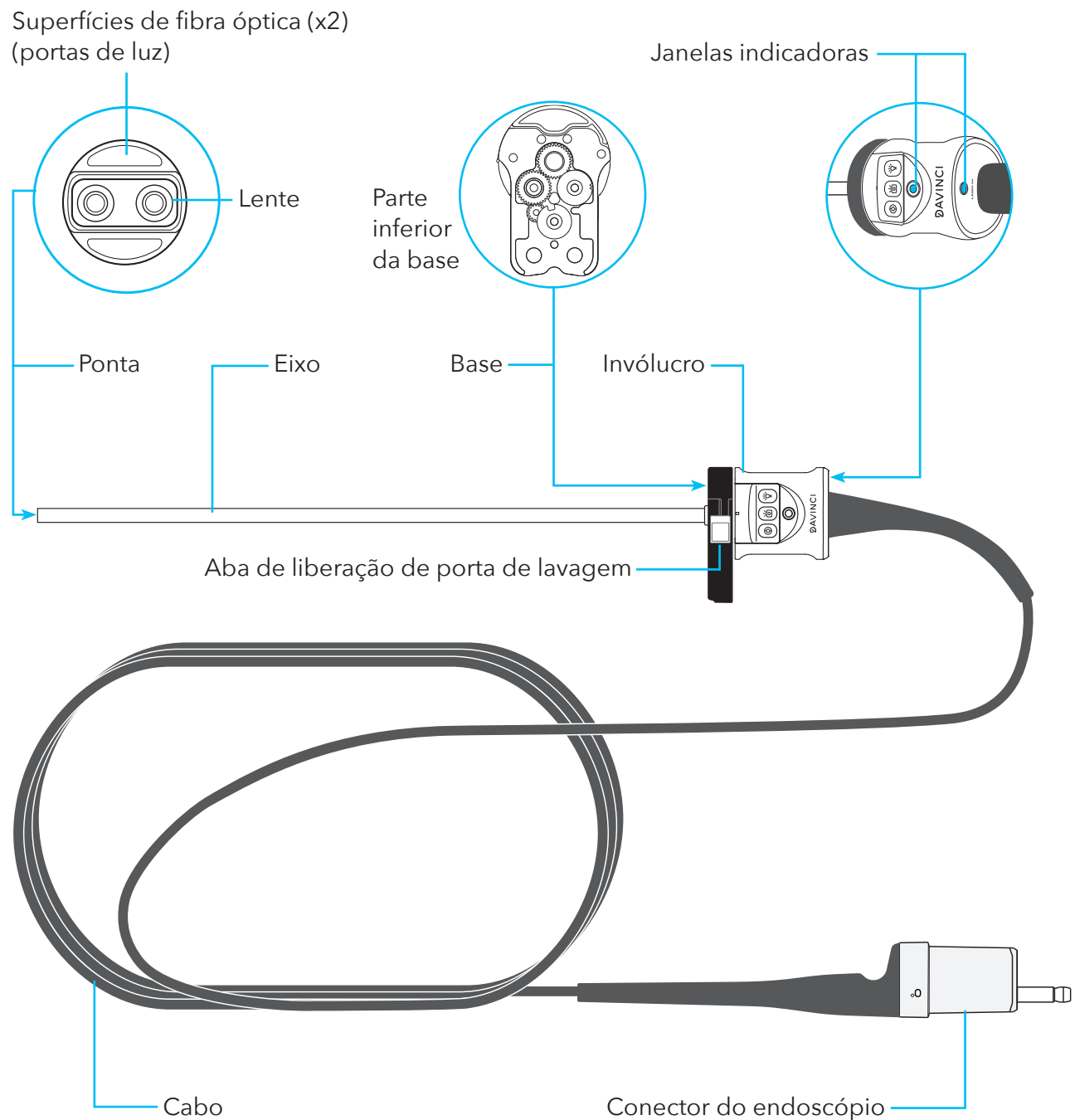

Todas as imagens do endoscópio são para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto.


Identificação do endoscópio

Endoscópio Plus da Vinci Xi

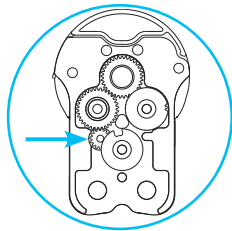


O número de engrenagens pode variar de acordo com a versão.


Marcação na lateral

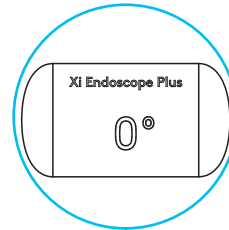

Invólucro

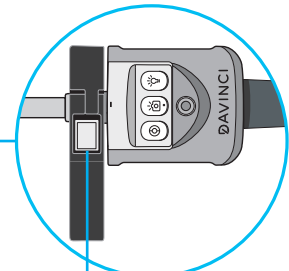


Aba de liberação de porta de lavagem (branca)

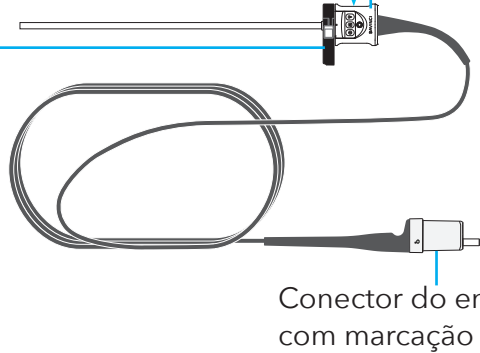


Conector do endoscópio com marcação de grau

Endoscópio sem tampa de conector

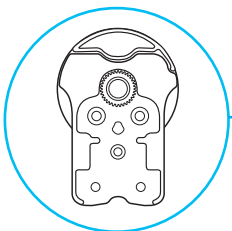


Três engrenagens na parte inferior da base

Invólucro

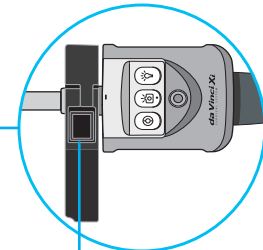


Aba de liberação de porta de lavagem (cinza)

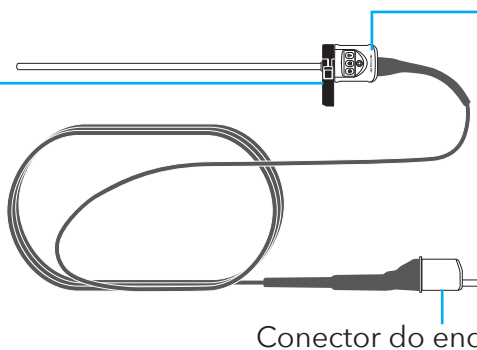

Conector do endoscópio

Endoscópio com tampa de conector

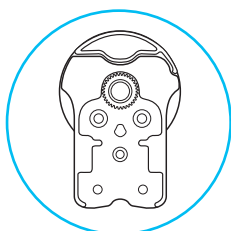


Três engrenagens na parte inferior da base

Invólucro



Aba de liberação de porta de lavagem (cinza)

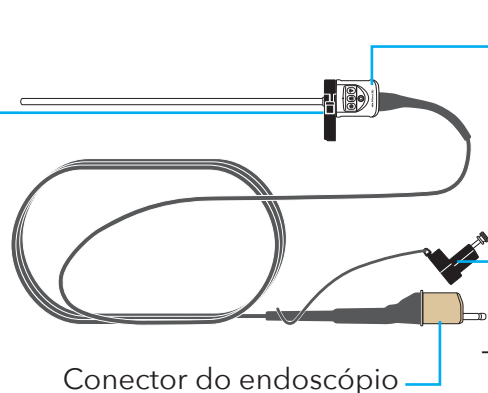

Conector do endoscópio

Tampa do conector e cabo

